

# ST-G7 Akülü Merdiven Sandalyesi

Güvenli, Mobil, Kolay, Modüler, Konforlu, Tek Operatörlü

Renk Seçenekleri:



## Kontrol Paneli

İnme veya çıkma butonu bırakıldığı zaman fren yapma özelliği.

## Kauçuk Kayış

Gerginlik ayar imkanı.

## Katlanabilir Ayak Desteği & Taşıma Kolları

Ergonomik mekanik tasarımı konfor ve gerekli durumlarda taşıma kolaylığı sağlar..

## Baş Destek & Emniyet Kemerleri

Konforlu ve dayanıklı.

## Yumuşak Oturak & Sırtlık

İnce ve dayanıklı çelik levha üzerine yumuşak kolay temizlenebilir minder.



Kompakt tasarıma sahip katlanmış ölçülerle kolay depolama ve taşıma imkanı





Güvenir frenli tekerlekler



Otomatik kilitlenir taşıma kolları



Daha uzun ve güvenilir palet mekanizması, kolay açma pedali




Modüler batarya & güvenlik anahtarı



Güç düğmesi & şarj girişi



Batarya şarj göstergesi.

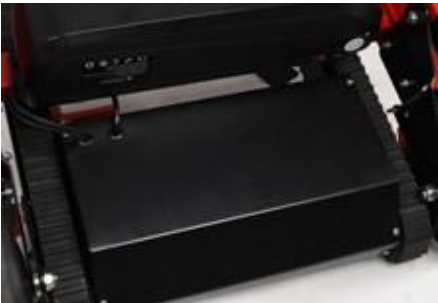

Motor koruma kapağı



Hız uyarı



Ekranlı kontrol paneli

## Genel Bakış

ST-G7 akülü merdiven sandalyesi çok fonksiyonludur. Yalnızca bir operatör aracılığı ile engelli/yaşlı/hasta bireylerin merdivenlerden inme ve çıkma işlemini gerçekleştirir. İhtiyaç durumunda ev kullanımına da uygun olan cihaz halkın ortak kullanım yapılarında da kolaylıkla kullanılabilir.

Geliştirilen tasarımı sayesinde dar merdivenlerden, güvenlik kontrol noktalarından, merdiven kapılarından kolaylıkla geçebilir ve uçak, metro gibi toplu taşıma araçlarına binme imkanı sağlar. Donanımındaki lityum-iyon batarya ve elektrik motoru sayesinde fiziksel efor sarf etmeden transfer işlemi gerçekleştirilebilir. Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için ürün gerekli ekipmanlar aracılığıyla geliştirilebilir.

## Avantajları

- ◆ Merdivenlerden hızlı ve güvenli transfer sağlamasının yanında düz zeminde tekerlekli sandalye olarak kullanılabilir.
- ◆ Ürünün metal gövdesi ağır hastaların taşınmasına imkan sunar. Maksimum taşıma kapasitesi 180kg'dır.
- ◆ Otomatik ani fren sistemi sayesinde kontrol panelini bırakmanız durumunda hareketi durdurur.
- ◆ Modüler Lityum-iyon batarya.
- ◆ Tutunmayı güçlendiren tınaklı kauçuk kayış yapısı.
- ◆ Katlanabilir ayak desteği ve düşük açılı palet mekanizması .
- ◆ Ayarlanabilir kumanda kolu ve kapabilir taşıma kolları.
- ◆ Batarya doluluk oranını anlık olarak gösteren ekran.
- ◆ Dayanıklı toz boya sayesinde oksitlenmeyi önler ve kolay temizlik imkanı sunar.
- ◆ Pürüzsüz 100\*32mm ön döner tekerler ve daha büyük 150\*32mm frenli arka tekerler.
- ◆ 2.5cm olan kayış-zemin mesafesi, halı veya pürüzlü yüzeylerde sorunsuz sürüş sağlar.
- ◆ Ergonomik ve kapanabilir baş ve ayak ucu kaldırma kolları ile kolay taşıma tekniği.
- ◆ Hızlı ve kolay katlanabilir yapısı sayesinde araç bagajında taşıma imkanı.

## Kullanım Alanları

Evler | Kamu Binaları | İş Merkezleri | Avm'ler | Hastaneler | Eğitim Kurumları  
| Fabrikalar | Oteller | Rezidanslar | Acil Servisler | Kişisel Kullanım

## Kullanıcılar

Engelli | Yaşlı | Yaralı | Hasta | Hamile Kadınlar

## Teknik Özellikler

Teleskopik kumanda kolu yükseklikleri	1080mm,1270mm,1460mm,1640mm
Teleskoip ön taşıma kolu ölçüleri	150mm, 350mm
Katlanmış ölçüleri	1080*520.8*242mm
Açılmış ölçüleri	1640*520.8*1030mm
Ambalaj	1 parça / Ahşap Sandık / 1150*580*320mm
Net ağırlığı	34kg
Ambalajlı ağırlığı	46kg
Taşıma kapasitesi	180kg
Motor	DC24V / 200W   DC36V / 300W
Batarya	24V / 13.2Ah Lityum İyon Batarya



### ◀ Stabil Sürüş

Palet mekanizması aynı anda 3 basamağa temas edebildiği durumda merdivenlerde stabil sürüş imkanı sağlar.

### ▼ Güvenli Duraklama

Operatör kontrolü bıraktığı durumda palet 3 basamağa basıyor ise güvenli duruş sağlar.



### ▲ Daha Az Efor & Kolay Manevra

Güçlü elektrik motoru ve bataryası sayesinde efor sarf etmeden merdivenleri inip-çıkabileceksiniz. Yüksek manevra kabiliyeti dar alanlarda transferi kolaylaştırır.